


TECNIS®  
МОНОФОКАЛЬНАЯ ИОЛ

Торическая

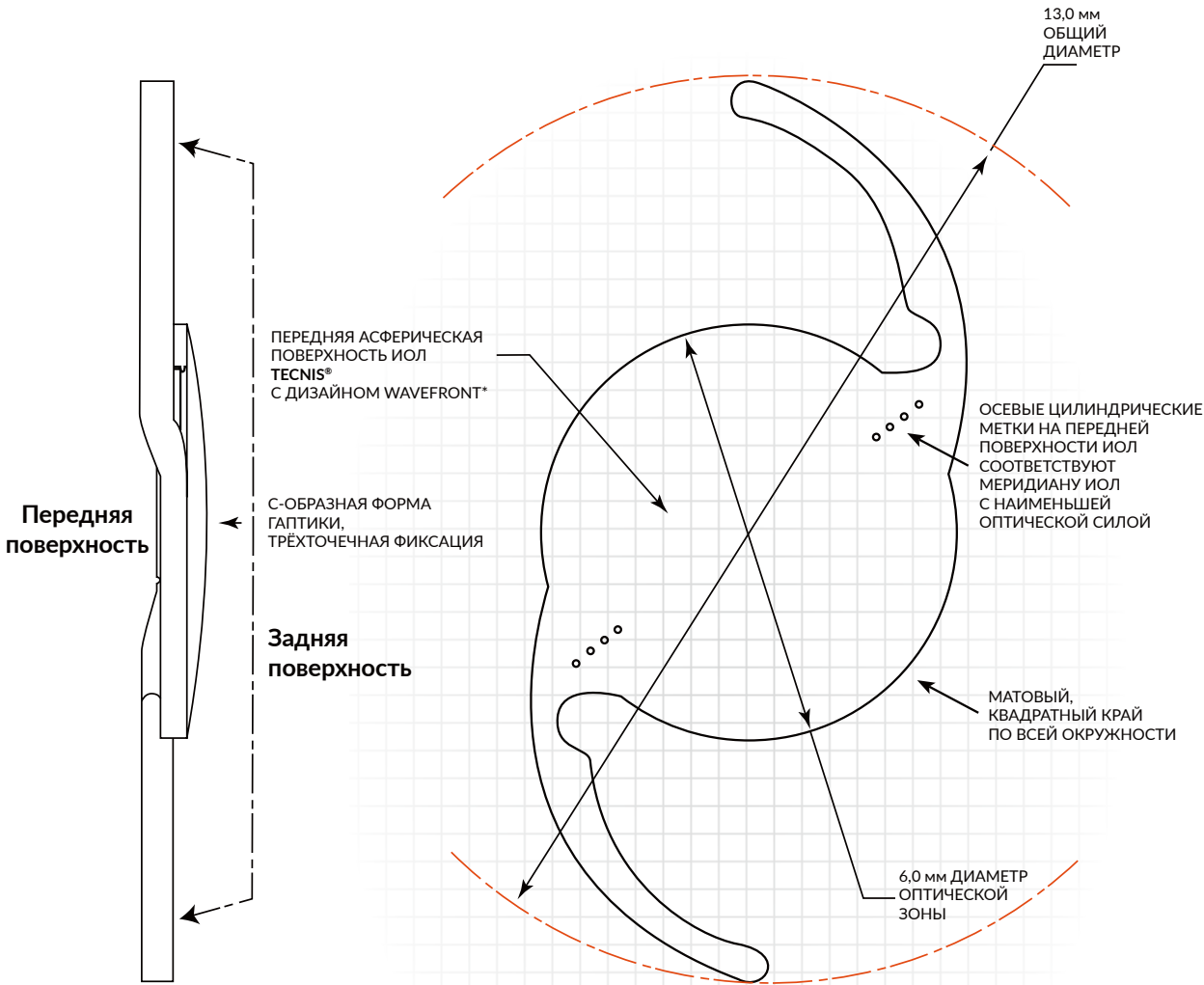

| TECNIS® ТОРИЧЕСКАЯ ИОЛ                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МОДЕЛЬ                                 | ZCT100 ZCT150 ZCT225 ZCT300 ZCT375 ZCT450 ZCT525 ZCT600 ZCT700 ZCT800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                        |  <b>TECNIS®</b><br>Монофокальная ИОЛ<br>Торическая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Описание                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Однокомпонентная ИОЛ с квадратным краем по всей окружности для обеспечения барьера для клеток эпителия</li><li>Край оптики матирован для снижения риска возникновения эффекта краевых бликов</li><li>Запатентованная торическая асферическая поверхность по технологии волнового фронта корректирует роговичную сферическую aberrацию глаза до нуля</li><li>10 цилиндров: от 1.00D до 8.00D</li></ul>                                       |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Размер                                 | Общий диаметр: 13,0 мм<br>Диаметр оптической части: 6,0 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Оптическая часть                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Гидрофобный мягкий акрил с УФ-фильтром</li><li>Число Аббе 55</li><li>Рефракционный индекс: 1,47 при 35 °C</li><li>Однокомпонентный дизайн</li><li>Передняя торическая асферическая поверхность с дизайном WAVEFRONT® по технологии волнового фронта</li><li>Матовый квадратный оптический край PROTEC® по всей окружности ИОЛ</li></ul>                                                                                                     |
| Гаптическая часть                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Трехточечный дизайн фиксации TRI-FIX***</li><li>Офсетный дизайн гаптики</li><li>С-образная форма</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Оптическая сила                        | От + 5,0 D до + 34,0 D с шагом в 0,5 D<br><br>10 величин цилиндров<br><br><b>Силы цилиндра (плоскость ИОЛ)</b><br>1.00D/ 1.50D/ 2.25D/ 3.00D/ 3.75D/ 4.50D/ 5.25D/ 6.00D/ 7.00D/ 8.00D<br><b>Силы цилиндра (плоскость роговицы)</b><br>0.69D/ 1.03D/ 1.54D/ 2.06D/ 2.57D/ 3.08D/ 3.60D/ 4.11D/ 4.80D/ 5.48D                                                                                                                                                                       |
| Поправочный коэффициент, (А-константа) | 119,3 для оптической биометрии<br>118,8 для ультразвуковой биометрии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Особенности                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Сферическая aberrация ИОЛ -0,27 полностью компенсирует положительную сферическую aberrацию роговицы +0,27</li><li>Запатентованная технология производственного процесса «алмазное криоточение» для минимизации эффекта «глистенинг»</li><li>Имплантируется через инжектор UNFOLDER® Platinum и картридж UNFOLDER® Platinum</li><li>Единая система доставки ИОЛ для всей платформы TECNIS®</li><li>Имплантация через разрез 2,2 мм</li></ul> |