


ИОЛ с увеличенной глубиной фокуса

TECNIS
Symfony®

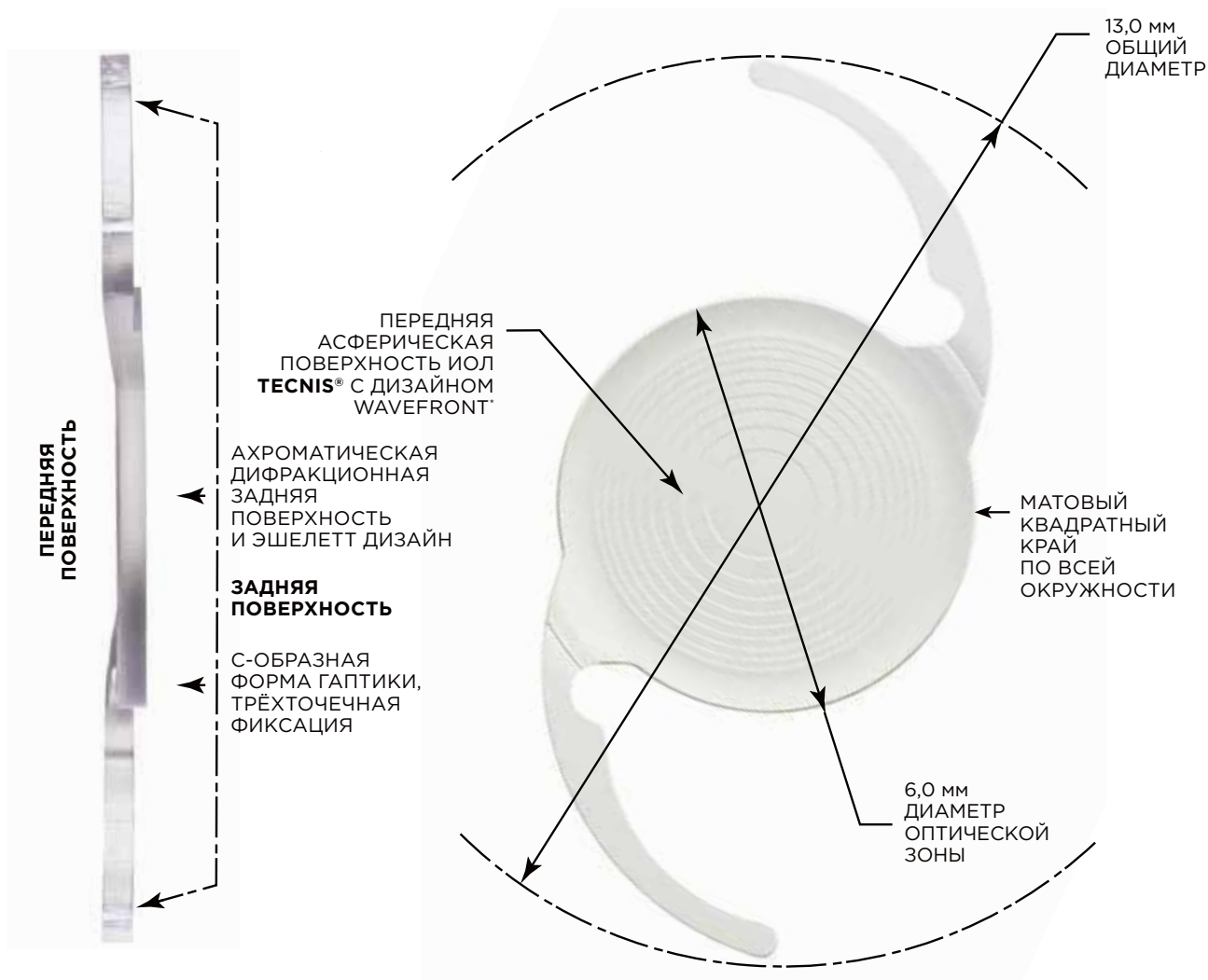

ИОЛ с увеличенной глубиной фокуса

	TECNIS SYMFONY®
МОДЕЛЬ	ZXR00
	
Описание	- ИОЛ с увеличенной глубиной фокуса для коррекции пресбиопии (EDOF - Extended Depth Of Focus) - Запатентованный «эшеллет» дизайн для создания пролонгированного диапазона фокуса - Запатентованная ахроматическая поверхность с дизайном волнового фронта для полного подавления сферических аббераций и увеличения контрастной чувствительности
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размер	Общий диаметр: 13,0 мм Диаметр оптической части: 6,0 мм
Оптическая часть	- Гидрофобный мягкий акрил с УФ-фильтром - Число Аббе 55 - Рефракционный индекс: 1,47 при 35 °C - Однокомпонентный дизайн - Двояковыпуклая - Передняя асферическая поверхность с дизайном WAVEFRONT® по технологии волнового фронта - Задняя ахроматическая дифракционная поверхность для усиления восприятия контрастности и эшелетт дизайн, который позволяет продлевать диапазон фокуса света - Матовый квадратный оптический край PROTEC® по всей окружности ИОЛ - Толщина по центру 0,7 мм (20,0 D)
Гаптическая часть	- Гидрофобный мягкий акрил с УФ-фильтром - Трёхточечный дизайн фиксации TRI-FIX*** - Офсетный дизайн гаптики - С-образная форма - Толщина 0,46 мм
Оптическая сила	От + 5,0 D до + 34,0 D с шагом в 0,5 D
Поправочный коэффициент, (А-константа)	119,3 для оптической биометрии 118,8 для ультразвуковой биометрии
Особенности	- Сферическая абберация ИОЛ -0,27 полностью компенсирует положительную сферическую абберацию роговицы +0,27 - Запатентованная технология производственного процесса «алмазное криоточение» для минимизации эффекта «глистенинг» - Имплантируется через инжектор UNFOLDER® Platinum и картридж UNFOLDER® Platinum - Единая система доставки ИОЛ для всей платформы TECNIS® - Имплантация через разрез 2,2 мм