


ИОЛ с непрерывным диапазоном фокуса

TECNIS Synergy® иол



Модель ZFROOV

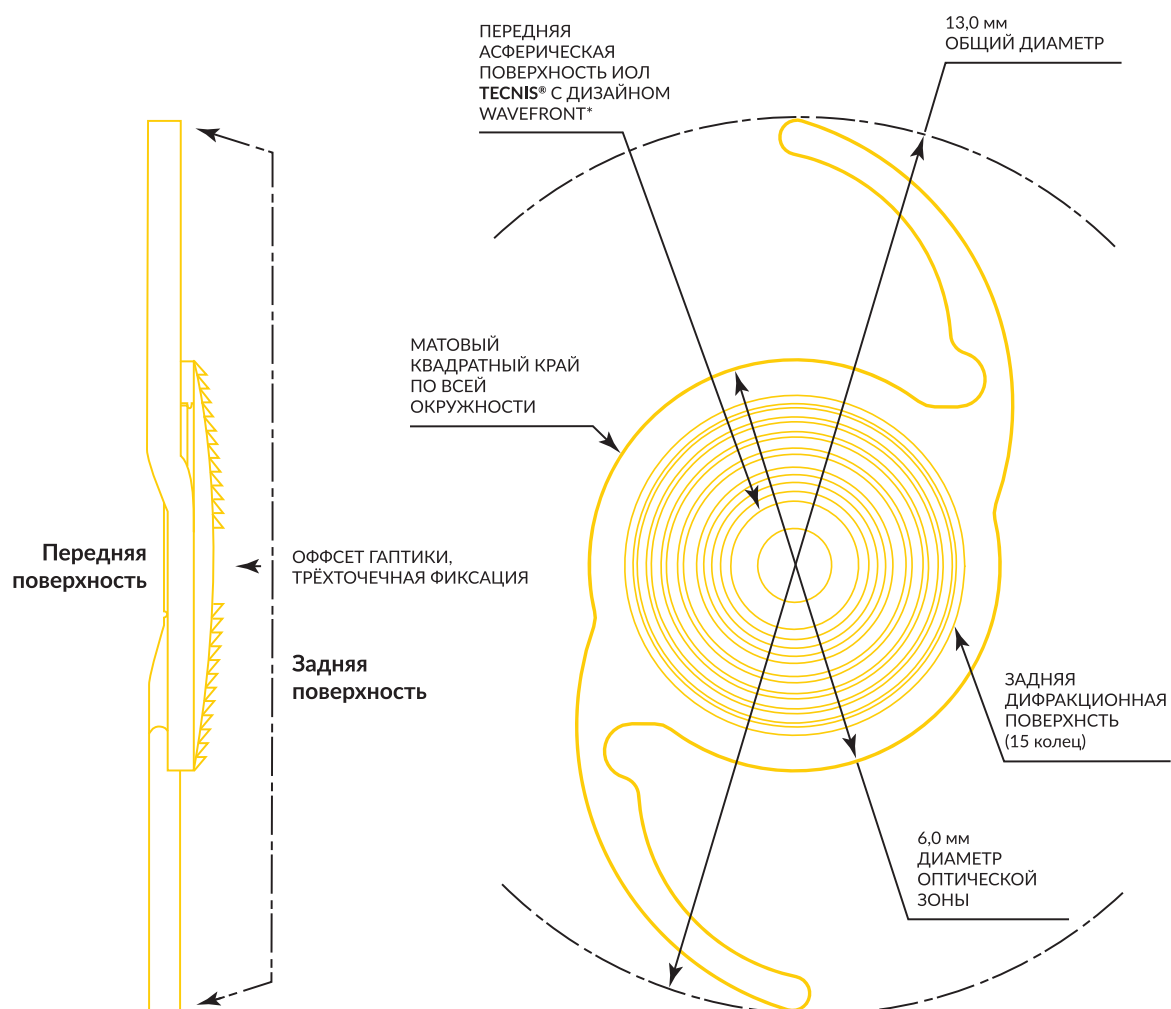

*Вейвфронт

ИОЛ с непрерывным диапазоном фокуса

ОПИСАНИЕ		
ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Оптическая сила	+5,0 D до +34,0 D с шагом в 0,5 диоптрии	
Диаметр оптической зоны	6,0 мм	
Форма	Двояковыпуклая, передняя асферическая поверхность с оптимизацией по волновому фронту и технологией ChromAlign® для коррекции хроматических aberrаций с целью усиления контрастной чувствительности.	
Материал	Мягкий, гибкий гидрофобный акрил с фильтрами ультрафиолетового и фиолетового спектров.	
Рефракционный индекс	1.47 при 35° C	
Дизайн края	Матовый квадратный край PROTEC** по всей окружности	
ChromAlign® технология	Запатентованная технология для коррекции хроматических aberrаций	
БИОМЕТРИЯ†	УЛЬТРАЗВУКОВАЯ	ОПТИЧЕСКАЯ
А-Константа	118,8	119,3
Глубина передней камеры	5,4 мм	5,7 мм
Хирургический фактор¹	1,68 мм	1,96 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАПТИКИ		
Общий диаметр	13,0 мм	
Тип	С	
Дизайн	TRI-FIX***, трёхточечная фиксация, оффсет гаптики, однокомпонентный дизайн	
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	МОДЕЛЬ	
UNFOLDER® Платинум: Инжектор	DK7796	
UNFOLDER® Платинум: Картридж	1MTEC30	

† Значение, теоретически полученное для типичной линзы 20,00D. Компания «Джонсон & Джонсон» рекомендует хирургам персонализировать А-константы, основываясь на своих хирургических техниках и оборудовании, опыте работы с моделью линзы и постоперационных результатах.

** Протек

*** Три-фикс

1. Холладей Дж.Т. «Международный регистр имплантации интраокулярных линз», 2003; «Журнал катарактальной и рефракционной хирургии», 2003; 29: 176–197. Информация для медицинских специалистов.

Ознакомьтесь с инструкцией по применению для получения важной информации по безопасности и проконсультируйтесь с нашими специалистами при возникновении вопросов.

Продукция TECNIS Synergy® является медицинским изделием. Регистрационное Удостоверение: 2023/19412 от 24.01.2023

TECNIS®, TECNIS Synergy® и UNFOLDER® являются зарегистрированными товарными знаками Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.

© «Джонсон & Джонсон». 2023

PP2023CT4486